

Taica **αPLA[®]L**
株式会社タイカ アルファプラ



※赤字はショート
(単位:cm)


特長

床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。三層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。

品番(TAISコード)
MB-LA1R 91巾 レギュラー (00563-000093)
MB-LA1S 91巾 ショート (00563-000094)



Taica **αPLA[®]FII**
株式会社タイカ

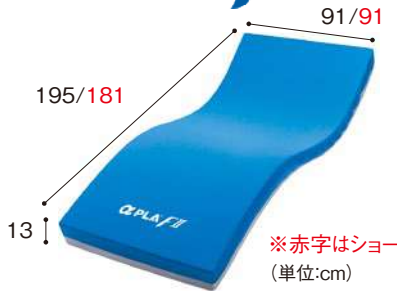

※赤字はショート
(単位:cm)

特長


床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい「寝返りサポートマットレス」。
硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。

品番(TAISコード)
MB-FIIW1R レギュラー (00563-000129)
MB-FIIW1S ショート (00563-000130)



パラマウントベッド株式会社
as human, for human
PARAMOUNT BED

ストレッチ グライド
Stretch-Glide[®]II **NEW**

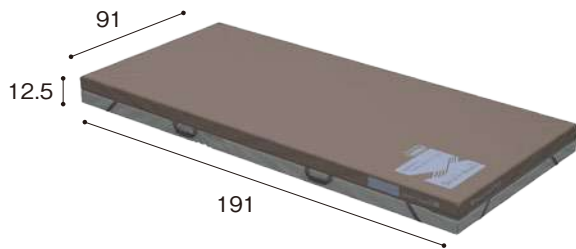

特長


独自のストレッチシステムに、ウレタンフォームを3層プラス。静止型マットレスで最高レベルの体圧分散性を発揮する床ずれ防止マットレスです。吸放湿性を有するカバーで、蒸れを軽減します。

品番(TAISコード)
KE-7B1N レギュラー (00170-001730)



パラマウントベッド株式会社
as human, for human
PARAMOUNT BED

Ever Proud
エバープライド

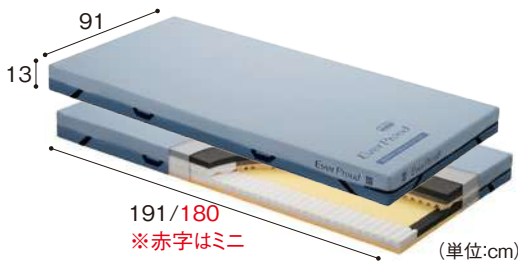

191/180
※赤字はミニ
(単位:cm)

特長

静止型で最高クラスの体圧分散性とずれ軽減機能で、床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス。
5層のウレタンフォームが、優れた体圧分散性を実現。
独自の生地「グライドシート」が、背あげ時にかかるずれ力を軽減。

品番(TAISコード)
KE-621TQ レギュラー (00170-000962)
KE-622TQ ミニ (00170-000963)



パラマウントベッド株式会社
as human, for human
PARAMOUNT BED

ここちあ りらくflow
cococia
利楽 flow




191/180
※赤字はミニ
(単位:cm)

特長

自動体位変換機能付きエアマットレスで「ずれ」「転落」を予防。自動的に体位変換をおこなう「スモールフロー機能」や、背あげしたときの姿勢保持をサポートする「バックサポート機能」などを自動的に実行します。

非課税

品番(TAISコード)
KE-911S レギュラー (00170-001351)
KE-912S ミニ (00170-001352)

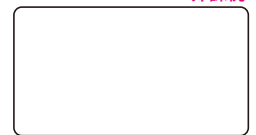



microclimate nexus iB

マイクロクライメイト ネクス アイビー



※赤字はショート
(単位:cm)

商品紹介



品番(TAISコード)
CR-773 レギュラー (00206-000162)
CR-777 ショート (00206-000164)

特長

- ・「傾斜型2層式エアセル」×「デュアルフィットセル」で快適な睡眠と療養・離床生活を支援します。
- ・新開発の傾斜型2層式エアセルなら、斜め下へ向かう力を受け止め、身体のずり落ちを軽減します。
- ・角度・時間管理アシスト機能が円滑なベッドサイドケアに役立ちます。
- ・吸引式ファンモーター搭載。マイクロクライメイト(皮膚局所の温度湿度)の上昇を抑え、直接、肌を乾かしすぎたり急激に冷やすこともなく、安全です。
- ・【経過時間表示機能】背上げの継続時間を視覚的に把握できます。
- ・【お知らせ角度設定】決められた背上げ角度で過ごす方や、液晶画面が見えにくい方に。



microclimate BIGCELL iS

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ



※赤字はショート
(単位:cm)

商品紹介



品番(TAISコード)
CR-753 レギュラー (00206-000141)
CR-757 ショート (00206-000143)

特長

従来の床ずれ発生の外的要因である「圧迫」「ずれ」「摩擦」の3大要因に加え、近年、これらの外的要因に影響を与える第4の要因として関心が高まっているのが、Microclimate(皮膚局所の温度・湿度)という新しい概念です。これまでの体圧分散によるケアだけでなく、「Microclimate」への対策によって、床ずれ防止の環境がさらに向上しました。



SMALL CHANGE LAGUNA

スモールチェンジ ラグーナ



※赤字はショート
(単位:cm)

紹介動画



品番(TAISコード)
CR-703 レギュラー (00206-000103)
CR-707 ショート (00206-000105)

特長

骨盤を支え、対角線上に小さな体位変換を頻回に行う「スモールチェンジ機能」を搭載。ご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、安心・安楽な環境を提供します。


停電対策

約14日間に圧保持。

クイックハードモード搭載

約4分間で硬くなります。

非課税


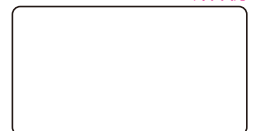


molten[®]
From the Inside Out
株式会社モルテン

SCOPE
スコープ **NEW**

molten[®]
From the Inside Out
株式会社モルテン

SCOPE Lite
スコープライト **NEW**

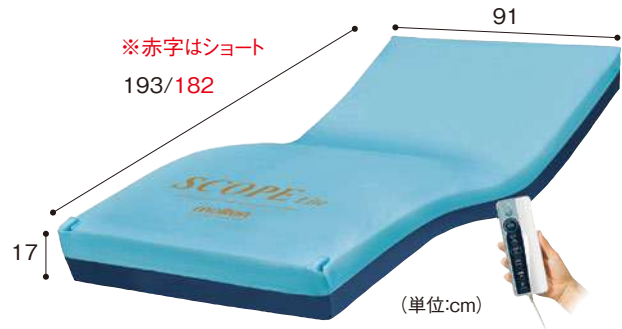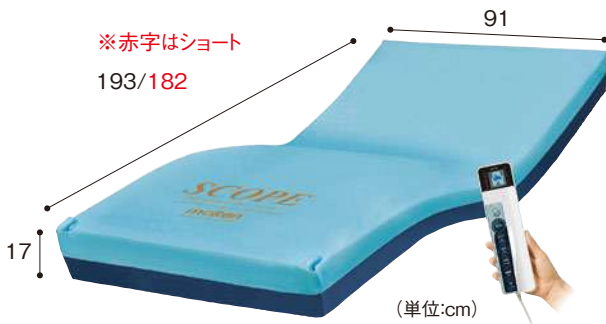

品番 (TAISコード)
MSCP91 レギュラー (00054-000648)
MSCP91S ショート (00054-000650)

非課税



品番 (TAISコード)
MSCPL91 レギュラー (00054-000652)
MSCPL91S ショート (00054-000654)

非課税



リモコン



全自動

リモコンの全自動ボタンを押すだけで、

さまざまな身体状態の利用者様に適応
身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応
以上を**マットレスが自動運転で対応**します

よって、「**ボタン操作(マニュアル操作)は一切不要**」です
利用者様の状態が変化した際にも、リモコンの設定変更が不要なため、設定ミスも防げます

臥床時の圧対策


- ① さまざまな身体状態の利用者様への適応
- ② 悪化時や回復時への適応

マットレスが身体状態の変化に対応し、自動で最適な圧対策を行います
利用者様の身体状況と変化からマットレスの選定・入れ替えで悩まれる
必要はありません

臥床時(スタート)


静止 - 体圧調整

30分間体動がなかったら

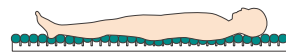


除圧 - 圧切替

30分間体動がなかったら

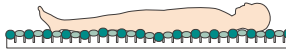


除圧 - 体位変換

除圧のための低角度の体位変換

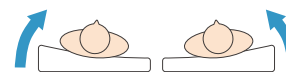

- ③ ベッド背上げ時の底着き対策・背抜き

センサーが背上げ角度を判定し、
自動で臀部の底着きを対策します
自動で「背抜き」を行い
圧による苦しさを緩和します

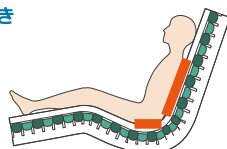


※ベッド背上げ時には体位変換は自動的に止まります

臀部周辺の圧の可視化

※スコープのみの機能です


見守り

パジャマのずれや厚手防水シーツのシワ、お尻の下の異物...
臀部周辺の圧の可視化は、体圧分布モニターで圧を示すことで見えない危険
を察知し、適切な処置をするための見守り機能です

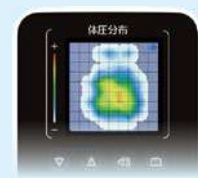

ポジショニングケアをもっと確実に


体圧分布モニターで圧の状態が確認できるため、確実な圧対策と利用者様の
楽な寝姿勢のためのポジショニングケアが可能です

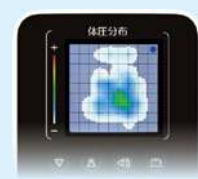



BELIEVE

ビリーブ

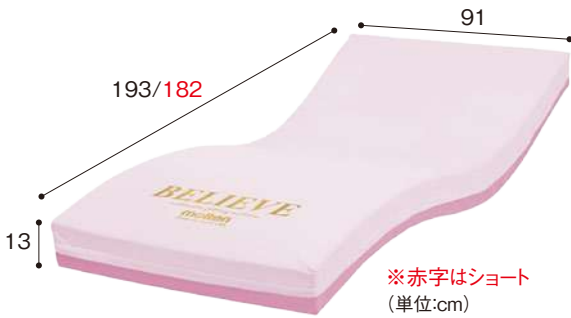

※赤字はショート
(単位:cm)

特長

寝返りの頻度を感知し最適な圧対策に導く自動フィッティングマットレス。
床ずれ防止エアマットレスの難しさ「選定」「操作」「入れ替え」のこれら3つを解決した画期的な自動運転のマットレスです。

品番 (TAISコード)
MBLV91 レギュラー (00054-000567)
MBLV91S ショート (00054-000569)



OSCAR

オスカー



※赤字はショート
(単位:cm)

特長

体圧分散式マットレスに求められる重要な9つの特性(①体圧分散性能②除圧性能③ずれ力対策④寝心地⑤座位安定性⑥むれ対策⑦ひえ対策⑧体位変換⑨安全・衛生対策)全てを備えています。

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- ずれ力対策
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策
- 体位変換
- 安全衛生対策

品番 (TAISコード)
MOSC91 レギュラー (00054-000137)
MOSC91S ショート (00054-000137)

LAC フレックスボード

ラックヘルスケア株式会社



サイズ:110×50cm



寝た状態のまま、ベッド⇄ストレッチャー、ベッド⇄リクライニング・チルト車いすへの移乗ができます。

39580-030
00245-000151



LAC マスターグライド M

ラックヘルスケア株式会社



サイズ:60×35cm

ベッドと車いす間に橋渡しをし、座ったままの姿勢で移乗が行えます。表面は滑らかで、裏面には2本の滑り止めテープが付いているので安全です。

39580-001
00245-000145



as human, for human PARAMOUNT BED イージーグライド M

パラマウントベッド株式会社



安全・快適に移乗できるトランスファーボードです。

KZ-A29036
00170-000570



サイズ:60×33cm

LAC マスターベルト

ラックヘルスケア株式会社



S 62~100cm
M 72~120cm
(ウエストサイズ目安)

移動時のサポートとして安全に介助を行えます。ベルトは幅広く、やわらかく腰部にフィットする形状。

S:39580-010
M:39580-011
00245-000144



特殊寝台付属品

床ずれ防止用具